

Systeme Dermage RF


Innovatieve energieën in de strijd tegen veroudering
Veroudering is een fenomeen dat langzaam ontstaat. Onmerkbaar veranderingen beginnende met een moe uitziend gezicht, ontwikkelen zich tot zichtbare tekenen van veroudering op het gelaat. De oppervlakkige huid verliest aan elasticiteit en tonus, vochtigheid vermindert en er ontstaan rimpels. Wanneer dit punt bereikt is, volgt een verdere achteruitgang in een versneld tempo. Om dit proces tegen te gaan is alleen een synergie van energie bronnen in staat om de verloren tonus, vorm en conditie van de huid te herstellen.



Radio Frequentie Massage RFsystem

Aangenaam gevoel, bewezen resultaat

De aangename RF energie wordt op een gecontroleerde wijze op het gezicht toegepast. De weldadige RF warmte zorgt voor een biologisch Thermal-effect dat de fibroblasten in de huid activeert om nieuw collageen aan te maken. Hiermee worden twee effecten bereikt: het opvullen van rimpels en de vermindering van gezichtsplooiën, het lifting-effect van de huid voor zichtbare contour verbetering. De huid krijgt haar natuurlijke elasticiteit en stevigheid terug met een verbeterde tonus en een gezonde glans.

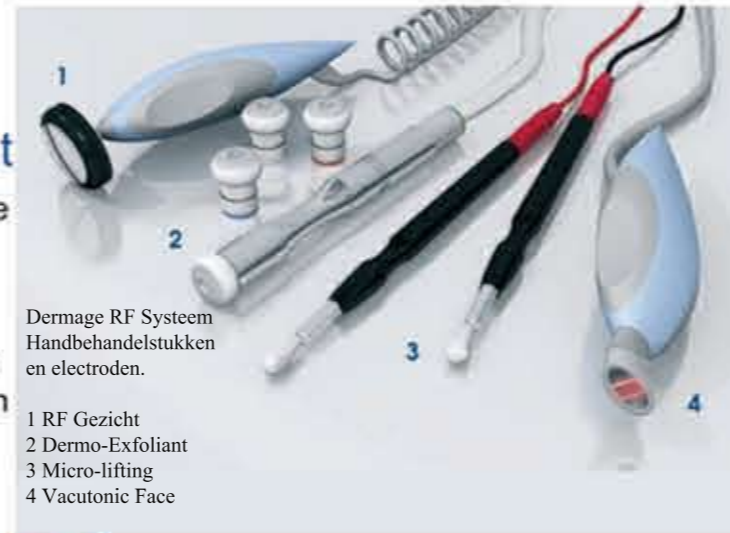

Dermage RF System Handbehandelstukken en elektroden.
1 RF Gezicht
2 Dermo-Exfoliant
3 Micro-lifting
4 Vacutonic Face

Esthetische Micro-lifting

Verzacht de tekenen van veroudering, harmoniseert de gezichtslijnen

Deze zeer exclusieve behandeling is gebaseerd op de doeltreffendheid van Myo-dermic massage om zichtbare huidveroudering symptomen te verminderen. Dankzij de zachte micro elektrische golven leeft vermoeid huidweefsel weer op, micro spanningen die kleine rimpels veroorzaken nemen af en de algehele gelaatstreken worden verzacht. De methode is actief op meerdere gebieden (lymfe, huid, spierweefsel en opname van werkstoffen) die elk een actieve ontwikkeling geven en in overeenstemming zijn voor een perfecte esthetische Anti-age behandeling.



De innovatie Dermo-Exfoliant

Een vooruitgang in micro-dermo abrasie

De Dermo-Exfoliant is ontwikkeld voor een micro dermabrasie met de nadruk op resultaat, eenvoud en gemak. Gegarandeerd een zorgvuldige, snelle en veilige "derma-smoothing" met lage behandelkosten. Een aanmerkelijke stap vooruit in vergelijking met behandelingen door middel van de vorige generatie apparatuur waarbij gebruikt wordt gemaakt van corundum kristallen, wat hoge kosten geeft en waarbij veelvuldig onderhoud noodzakelijk is.




De Dermo-Exfoliant Methode
Delicate vernieuwing van het huidweefsel

Een nieuw systeem voor cosmetische "soft" dermo-abrasie ontwikkeld voor de schoonheidsspecialiste. De Dermo Exfoliant methode geeft op een delicate wijze de gezichtshuid weer haar jonge en gezonde zachtheid terug. De werking is gebaseerd op een plaatselijke vacuüm zuiging van kleine huid deeltjes in combinatie met het egaliseren van het huidoppervlak waarbij maximale hygiëne en veiligheid gewaarborgd wordt.

De Dermo-Exfoliant behandeling

Opnemen en Verwijderen

De behandeling is gebaseerd op twee noodzakelijke werkingen: Vacuüm aanzuiging stimuleert de verbetering van de microcirculatie en de zuurstof toevoer van het behandelde weefsel. Tijdens de vacuüm behandeling is de huid onder spanning en voorbereid voor het op zachte, doeltreffende wijze verwijderen van dode huidcellen en het delicaat egaliseren van de bovenste huid lagen. De behandeling is ideaal voor het gezicht met bewezen resultaten, maar is zeker ook aan te bevelen voor het behandelen van kleinere lichaamsoppervlaktes. De Dermo-Exfoliant methode kan als een op zich zelf staande behandeling worden gegeven maar is ook zeer geschikt als voorbereiding van, of in combinatie met de synergie van energie, voor de beste resultaten van Anti-age behandelingen.

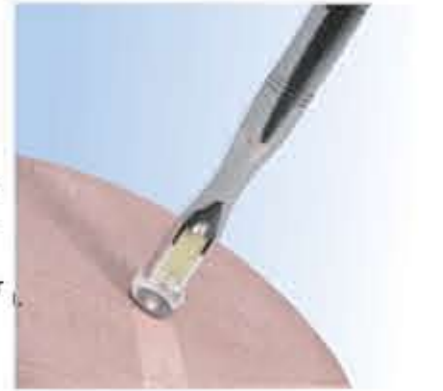

CARATTERISTICHE TECNICHE
Sistema operativo: multimedico con Touchscreen Specifico Anticella e Sistema Dermo-Exfoliant Radiofrequenza Rhyssim: 450 kHz. Vacutonic System: aspirazione max. a 0,9 atm. Fotomassage: 638 nanometri Micro-Lifting: max. 1 mA Dermo-Exfoliant: aspirazione max. 0,9 atm. Potenza assorbita: 150 w Alimentazione: disponibili varie alimentazioni da 90 v. a 240 v. - 50/60 Hz. Dimensioni corpo macchina: cm. 49 x 38,5 x 19,7 h (23,5 con vaschetta) Dimensioni corvella: (tombola a parte su richiesta) cm. 56,4 x 56,3 x 120 h

Art.2098/N MAJOR Dermo-EXFOLIANT
CARATTERISTICHE TECNICHE
Sistema operativo: metodo Dermo-Exfoliant Aspirazione: max. 0,9 atm. Potenza assorbita: 120 w Alimentazione: disponibili varie alimentazioni da 90 v. a 240 v. - 50/60 Hz. Dimensioni corpo macchina: cm. 49 x 38,5 x 19,7 h (23,5 con vaschetta) Dimensioni corvella: (tombola a parte su richiesta) cm. 56,4 x 56,3 x 120 h

| ART. | MODELLO | METODI E FUNZIONI | | | |
|--------|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|
| | | Metodo Dermo-Exfoliant | Radiofrequenza Rhyssim | Vacutonic System & Fotomassage | Micro-Lifting |
| 2084/N | DERMAGE RFSYSTEM | • | • | • | • |
| 2098/N | MAJOR Dermo-EXFOLIANT | • | | | |

- De specifieke Anti-age behandelingen
- De Dermo- Exfoliant methode



Specifieke Anti-age Behandelingen

Energieën in Synergie: Radiofrequentie, Face Vacutonic, Fotomassage en Micro-lifting

Om echte zichtbare resultaten te bereiken is het nodig in synergie te werken. Door de meest geavanceerde Anti-aging gezichtsmethodes te combineren ontstaat een nieuwe kwaliteit in behandelingen. Deze biedt de klanten duidelijk zichtbare en meer bevredigende resultaten. Opvallende verbeterde gezichtcontouren, rimpel vermindering en een algehele verjonging en opleving van de conditie van de gezichtshuid.

Face Vacutonic met Fotomassage

Verstevigt en verjongt het gezicht

De Vacutonic ondersteunt de behandeling voor een verbeterde weefselelasticiteit en tonificatie. De zachte en plezierige behandeling verhoogt de oppervlakkige bloed-circulatie en herstelt de delicate Hydro balansen van de huid waardoor op een zeer aangename wijze een Anti-age effect bereikt wordt.



Dermo-Exfoliant Anti-age Behandelingen & Radiofrequentie